

Mitte keeta: toode on valmis kasutamiseks.

Ei sisalda BPA-d, lateksit, silikooni ega ftalaate.

Proovige kuidas eelseadistatud toode Teile sobib:

Sleepright on reguleeritavate labadega, mis on algseadistatud sobima enamuste inimestele. Aseta seade suhu peegli ees ja kontrolli kuidas eelseadistatud asend sulle sobib.

Hammaste vahelised labad on mõeldud kasutamiseks ülemiste ja alumiste molaaride vahel. Labade esimene ots peaks toetuma keskjoonest ülemise kolmanda ja neljanda hamba vahele. Labasid ühendav osa peab asetsema alumise huule vahel igemetel. Teie kehatemperatuur aktiveerib selle kuju võtmise omadused parimaks sobitumiseks. Hambaid tuleks toetada ainult labadele, mitte neid ühendaval osal.




Labade reguleerimine:



Sleeprightil on neli seadistust mõlemal küljel, mis võimaldavad sättida labasid ette- ja tahapoole (muutes seadme sobivust suurusteks S, M, L XL).

Kui olete korra oma Sleeprighti õigesse positsiooni sättinud, siis see püsib seal ning igal kord uut sättimist pole vaja.

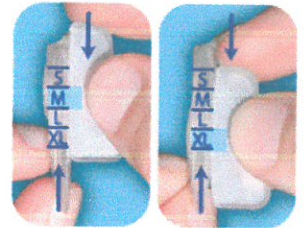


Hoidke kinni labasid ühendavast osast ja reguleerige labade asetus sobivale kohale. Selle lihtsustamiseks soovime kasutada vett (st teha seade märjaks).



Hammaste toetamisel labadele, võtab see automaatselt Teie hambumusele sobiva nurga.



NB! Mitte sikutada seadet labasid ühendavast osast.

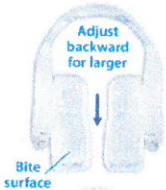

←--Liigutades labasid tahapoole saate seadet suurendada.

Liigutades labasid ettepoole, saate seda sobitada väiksemaks --→



Infoks ja parimate tulemuste saavutamiseks:

- Parimaks tulemuseks alustage kandmist 30 min enne voodisse minekut.
- Lähtuge põhimõttest huuled koos, hambad lahus. Nii saavad näolihased lõdvestuda.
- Seadme kasutamise alguses võib esineda näolihaste- ja liigestes valulikkust. See tuleneb muudatustest näolihaste harjumuspärasest tegevusest.

Kuidas seade töötab:

Hammaste krigistamise ja kokkusurumise tõttu kuluvad hambad ebalooslikult, võib esineda fraktuuride ja täidiste osalist murdumist. Sleepright seade on mõeldud eraldamiseks ülemist ja alumist hambakaart, hoides loomulikku vahet nende vahel. Kogu seadme kandmise ajal proovige lähtuda põhimõttest huuled koos, hambad lahus. See põhimõte lõdvestab näolihaseid -ja liigeseid.



Hammaste kokkusurumisel tekib krigistamine.

Hammaste vahel loomulikku vahet hoides on lihased lõdvestunud.

Puhastamine:

Puhastada igapäevaselt jaheda veega. Mitte kasutada kuumat vett. Puhastamisel võib kasutada hambaharja ja hambapastat. Kui tootel esineb mõranemist tuleks see vahetada. Video seadistamise ja toote kohta on leitav siit ----->

Tootja: Plintek Inc, 15555W, 108th, St, Lenexa, KS 66219, USA, Sleepright.com. Volitatud esindaja:

CE, klass 1 meditsiiniseade,

