

NUTIKAS KOMPOSIIT

UNIVERSAL

UUS!



CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

Mitu erinevat tüüpi ja värvi komposiiti on vaja, et saavutada ilus ja kauakestev restauratsioon igas kaviteedi klassis? Valides toote CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL näete, et piisab vaid mõnest toonist.



1 TOON TAGAHAMMASTELE

Kõigi tagumiste restauratsioonide korral saab sõltumata hambatoonist kasutada ühte universaalset tooni (U).



2 TOONI ESIHAMMASTELE

Esteetiliselt nõudlikumate esihammaste korral saab olenevalt hambatoonist valida ühe kahest toonist: universaalne hele (UL) või universaalne tume (UD).



TOONE POLE VAJA VÕRRELDA

Nutika optilise lahenduse tõttu sulandub CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL märkamatu ümbritseva hambakoega ühte.

TOOTE OMADUSED

Nutikas optiline lahendus

Laitmatu esteetika ja kasutuslihtsus vaid üksikute toonidega

Lihtsalt vormitav, mittekleepuv ja pika tööajaga

Loomulik ja kauakestev läige pärast kerget poleerimist

Kulub ja kahaneb vähe ning ei kuluta vastashammast

EELISED

▶ Toone pole vaja valida

▶ Lihtne, aegasäästev, ootuspärased tulemused ja vähem töövahendeid

▶ Mugav käsitseda ja hõlbus vormida

▶ Kaunis lõpptulemus, mis kestab kaua

▶ Vastupidavad restauratsioonid


SUUREPÄRASED MEHAANILISED OMADUSED

Paindetugevus	118 MPa
Täiteosakeste maht	78 kaalust% (69 mahust%)
Survetugevus	347 MPa
Mahuline kahanevus	1,9 %
Kõvastumissügavus	2,0 mm
Tööaeg tavavalguse käes	4,5 min

Allikas: Kuraray Noritake Dental Inc.

KURARAY NORITAKE DENTALI VALGUST HAJUTAV TEHNOLOOGIA

Restauratsioonideks vajalike toonide hulga vähendamine tootes CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal on võimalik Kuraray Noritake Dentali täiustatud valgust hajutava tehnoloogia (Light Diffusion Technology, LDT) integreerimise abil. Valgust hajutava tehnoloogia tõttu hajub valgus restauratsioonis sarnaselt hambakoole. Selle tulemusel sobitub materjal ümbritseva hambakoega kokku hõlpsalt ja sujuvalt. Tulemuseks on märkamatud täidised. Kuraray on valgust hajutavat tehnoloogiat kasutanud aastaid. Valgust hajutavate täiteainete kuju, jaotuse ja koguse optimeerimise tulemusel on loodud CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal.

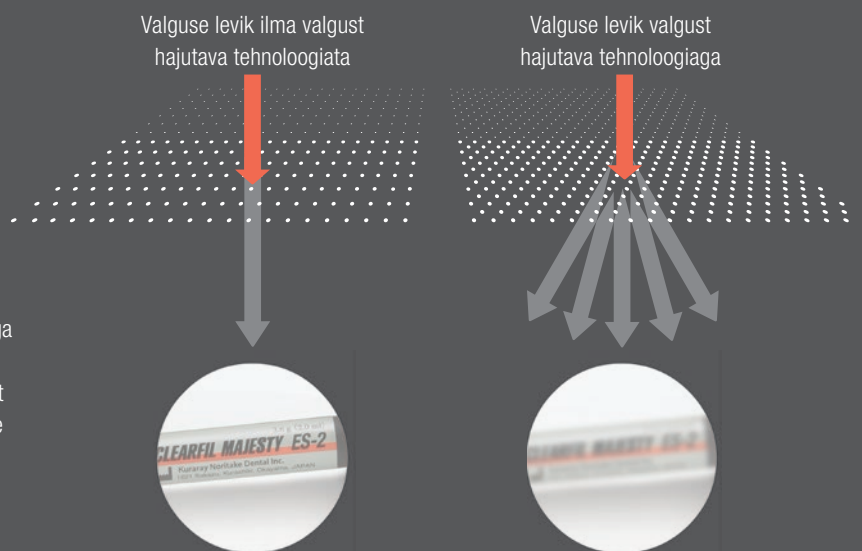

NUTIKALT SAAVUTATUD ESTEETIKA

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal Universal sisaldab väikseimat võimalikku toonide hulka, millega saab luua esmaklassilise esteetikaga tulemusi. Universaalsed toonid suudavad vastavalt allolevale toonivõrdlustabelile kõigest mõne tooniga katta kõik kaviteedi klassid.

KAVITEEDI KLASS	TOON				
	A1 B1, B2	A2 D2, C1	A3 C2, D3	A3.5 B3, B4	A4 C3, C4
I	<div style="text-align: center;"> Universal </div>				
II					
III	<div style="text-align: center;"> Universal Light </div>		<div style="text-align: center;"> Universal Dark </div>		
IV					
V					

Heledate esihammaste (nt valgendatud või piimahambad) kaviteetidele pakume spetsiaalset universaalset valget tooni (UW).

TOOTEVALIK

ARTIKKEL NR.	CLEARFIL MAJESTY™ ES-2	SISU
#3181-EU	UNIVERSAL Syringe (U)	1 süstal U: 2,0ml (3,6g)
#3183-EU	UNIVERSAL Syringe Light (UL)	1 süstal UW: 2,0ml (3,6g)
#3184-EU	UNIVERSAL Syringe Dark (UD)	1 süstal UL: 2,0ml (3,6g)
#3182-EU	UNIVERSAL Syringe White (UW)	1 süstal UD: 2,0ml (3,6g)
#3191-EU	UNIVERSAL PLT (U)	20 PLT U: 0,25g
#3193-EU	UNIVERSAL PLT Light (UL)	20 PLT UW: 0,25g
#3194-EU	UNIVERSAL PLT Dark (UD)	20 PLT UL: 0,25g
#3192-EU	UNIVERSAL PLT White (UW)	20 PLT UD: 0,25g

Lisateavet leiate veebisaidilt kuraraynoritake.eu/ee/clearfil-majesty-es2-universal

