

SeptoAccessories

From now. Everyday. Septodont Accessories.



Sisukord

INSTRUMENDID

Septo Contact.....	4
Septo Compo Shape	6
Septo Cure.....	8

VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE

Septo Discs.....	10
Septo Wheels PX	12
Septo Polisher.....	14
Septo Fipo Strip.....	16
Septo Diamond Strip	18
Septo Diamond Paste.....	20

MATRIITSID

Septo Matrix Cervical	22
Septo Matrix Sectional	24

KIILUD

Septo Wedges	26
---------------------------	----

ISOLATSIOON

Septo Tape.....	28
------------------------	----

PROFÜLAKTIKA

Septo Prophy Strip	30
---------------------------------	----

SeptoContact
Instrumendid



INSTRUMENDID

SeptoContact (komposiidi kontaktpunktide rekonstrueerimise instrumendid)

INSTRUMENDID KOMPOSIIDI KONTAKTPUNKTIDE REKONSTRUEERIMISEKS


NÄIDUSTUSED

Hästi valitud instrumendid mõjutavad hambaarsti töö tõhusust ja ergonomikat. SeptoContact on väga praktiline instrument, millega on komposiit-restauratsiooni protseduurides lihtne täpseid kontaktpunkte rekonstrueerida.

OMADUSED JA EELISED

Garanteeritult täiuslik kontaktpunkti rekonstruktsioon korratava kolmeastmelise tööjuhendi läbimisel.

- Üks instrument suurtele kaviteetidele (L) ja üks väikestele (S).
- Igal instrumendil on distaalne ja mesiaalne otsak.
- Läbipaistvad instrumendid võimaldavad valguskõvastamist; sobivad steriliseerimiseks.

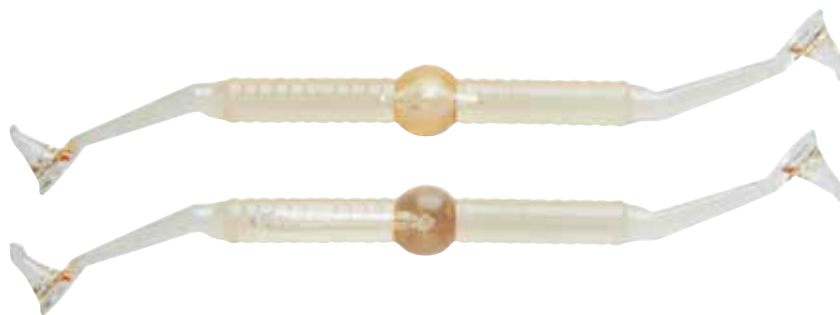

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoContact: 2 instrumenti (L ja S), mõlemal distaalne ja mesiaalne otsak

SeptoCompo Shape
Instrumendid



INSTRUMENDID

SeptoCompo Shape (komposiidi vormimise instrumendid)


SILIKOONOTSAKUTEGA INSTRUMENDID KOMPOSIIDI VORMIMISEKS

NÄIDUSTUSED

SeptoCompo Shape silikoonotsakutega instrumendid on väga käepärased ja täpsust võimaldavad modelleerimisvahendid otseste ja kaudsete restauratsioonide puhul. Nende instrumentide kaheldamatuteks eelisteks on lihtne käsitsetavus, abi järjestikuste kihtide pealekandmisel ning võimekus tulla toime iga komposiidi kleepuvusega. Iga liigutus SeptoCompo Shape'iga aitab anda komposiidile ideaalset anatoomilist vormi.

OMADUSED JA EELISED

- Vältivad kihilisest tehnikast tingitud joonte ja konaruste teket komposiidikihtide vahel.
- Vormivad siledad pinnad, vähendades oluliselt viimistlemisele ja poleerimisele kuluvat aega.
- Saadaval kahes versioonis, kõvade ja pehmete otsakutega, tagades parimad tulemused kasutatavast komposiidist olenemata.
- Otsakud on saadaval 4 eri kujuga, nii et neid on võimalik kasutada erinevates kliinilistes olukordades.
- SeptoCompo Shape instrument sobib steriliseerimiseks (sh otsakud).

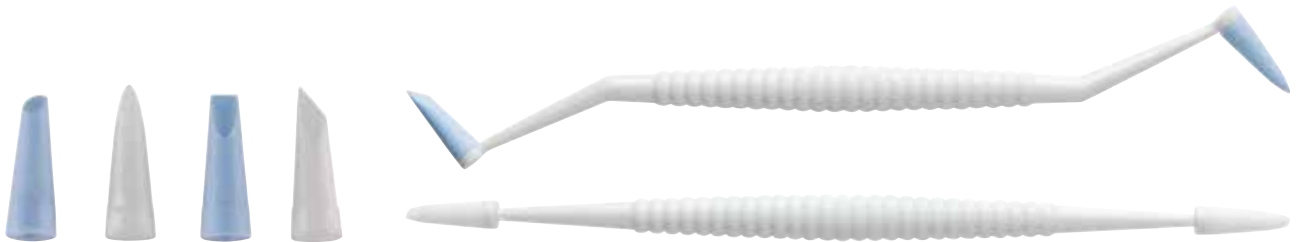

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoCompo Shape komplekt: 2 instrumenti + 8 otsakut (pehme/kõva)

Täitekomplekt: 4 eri kujuga pehmet otsakut

Täitekomplekt: 4 eri kujuga kõva otsakut

SeptoCure
Instrumendid



INSTRUMENDID

SeptoCure (komposiidi kondenseerimise instrumendid II klassi restauratsioonideks)

INSTRUMENDID, MIS VÄHENDAVALD OTSESTE ADHESIIVRESTAURATSIOONIDE KORRAL MARGINAALSE LEKKE RISKI IGEMEPIIRKONNAS

NÄIDUSTUSED

SeptoCure instrumendid lihtsustavad komposiidi paigaldamist igemeserva piirkonnas, aitavad komposiiti igeme serval suurepäraselt tihendada ning tõsta komposiitide polümerisatsiooni tõhusust raskesti ligipääsetavates kohtades. Klass II täidiste lekkimine igemega kokkupuutuvate hambaseinte piirkonnas väheneb oluliselt, kui hambaarst kasutab instrumenti, mis juhib ideaalselt polümerisatsiooniseadmest tulevat valgust ja lihtsustab seega komposiidi pealekandmist. Tänu SeptoCure'ile muutub komposiidi otsene täite- ja sidustamissüsteem täielikult kumeraks, mis tähendab mitte üksnes head tööd marginaalse terviklikkuse tagamisel, vaid ka optimeeritud mehaanilisi omadusi.

OMADUSED JA EELISED

- Vältivad ja minimeerivad täidiste marginaalset leket II klassi restauratsioonides.
- Ei kleepu polümerisatsiooni käigus komposiidi külge.
- Läbipaistev instrument võimaldab komposiiti tõhusamalt valguskõvastada, sest valgus liigub läbi instrumendi otsaku.
- Võimaldab komposiiti korralikult kaviteedi põhjale kanda.
- Sobib steriliseerimiseks.



PAKEND

KIRJELDUS

SeptoCure: 2 instrumenti 4 erineva otsakuga

SeptoDiscs

Viimistlemine ja poleerimine



VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE

SeptoDiscs (viimistlus- ja poleerimiskettad)

VIIMISTLUS- JA POLEERIMISKETTAD KOMPOSIITIDELE

NÄIDUSTUSED

SeptoDisc abrasiivkettad võimaldavad saavutada pindade kõige tähtsamaid omadusi - siledust ja läiget.

Paindlikud: ligipääs proksimaalsetele ja interproksimaalsetele pindadele.

Õhemad: lihtsam ligipääs keerulistele kohtadele, lihtsam proksimaalsete pindade kontuurimine ja viimistlemine.

Kvaliteetne lõpptulemus: pindade minimaalne karedus, kõrgläige.

Tugev abrasiivsus: parem viimistluse lõpptulemus lühema ajaga, ülemäärase komposiidi lihtne eemaldamine.

OMADUSED JA EELISED

- Käepärane, vastupidav ja lihtne kasutada.
- Kettaste paigaldamine mandrellile (spindlile) on lihtne ja kiire, samuti abrasiivpinna vahetamine mesiaalsete ja distaalsete asendite puhul.
- Eriti peened kettad on väga painduvad ja mitmekülgse kasutusega. Sobivad ideaalselt raskesti ligipääsetavate kohtade puhul.
- Neli värvkodeeritud teralisust, saadaval suurustes $\varnothing 1/2''$ ja $\varnothing 3/8''$



suurus 3/8''



suurus 1/2''

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoDiscs komplekt: 120 kettast+SeptoDiscs mandrell:
($\varnothing 1/2''$: 20 x jäme, 20 x keskmine, 20 x peen, 20 x ülipeen,
 $\varnothing 3/8''$: 10 x jäme, 10 x keskmine, 10 x peen, 10 x ülipeen)

Sega-täitekomplekt $\varnothing 1/2''$: 50 kettast (15 x jäme,
15 x keskmine, 10 x peen, 10 x ülipeen)

Jäme täitekomplekt $\varnothing 1/2''$ (bordoopunane): 50 kettast

Keskmine täitekomplekt $\varnothing 1/2''$ (tumeroosa): 50 kettast

Peen täitekomplekt $\varnothing 1/2''$ (helerooa): 50 kettast

KIRJELDUS

Ülipeen täitekomplekt $\varnothing 1/2''$ (valge): 50 kettast

SeptoDiscs mandrell: 1 tk

Sega-täitekomplekt $\varnothing 3/8''$: 50 abrasiivkettast

Jäme täitekomplekt $\varnothing 3/8''$ (bordoopunane): 50 kettast

Keskmine täitekomplekt $\varnothing 3/8''$ (tumeroosa): 50 kettast

Peen täitekomplekt $\varnothing 3/8''$ (helerooa): 50 kettast

Ülipeen täitekomplekt $\varnothing 3/8''$ (valge): 50 kettast

SeptoWheels PX

Viimistlemine ja poleerimine



VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE

SeptoWheels PX (vildist poleerimiskettad)

IMPREGNEERITUD VILTKETTAD LÕPLIKU LÄIKE ANDMISEKS

NÄIDUSTUSED

Täiusliku täidise tegemine nõuab oskusi, ideaalseid materjale ja töökindlaid instrumente. Et anda poleerimisele kordumatu lõppviimistlus, on asendamatuteks vahenditeks SeptoWheels PX viltkettad.

Pindadelt peegelduv valgus annab loomuliku välimusega rekonstruktsioonile soovitud tulemuse.

SeptoWheels PX viltkettad on valmistatud naturaalsest villast ja impregneeritud (immutatud) abrasiivse poleerimispastaga, mis paari veetilga lisamisel aktiveerub.

OMADUSED JA EELISED

- Lõpp-poleerimise suurepäraseks tulemuseks on loomulikult säravad pinnad.
- Ilusad, valged ja säravad hambad pärast valgendamisprotseduuri.
- Impregneeritud ülipeene dehüdreeritud alumiiniumoksiid-poleerimispastaga, mis aktiveerub paari veetilga lisamisel.
- Saadaval läbimõõdus 9,5 mm.



PAKEND

KIRJELDUS

SeptoWheels PX* komplekt: 12 impregneeritud viltketast + SeptoPlus mandrell

SeptoPlus mandrell: 1 tk

*Vajalik SeptoPlus mandrell (spindel)

SeptoPolisher

Viimistlemine ja poleerimine



VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE

SeptoPolisher (silikoonpoleerijad)

SILIKOONPOLEERIJAD KOMPOSIITIDELE, KLAASIONOMEERIDELE JA AMALGAAMIDELE

NÄIDUSTUSED

SeptoPolisher'i abrasiivsed (alumiiniumoksiidiga) silikoonpoleerijad muudavad restauratsiooni viimistlemise- ja poleerimisprotsessi lühemaks. Olenevalt avaldatavast survest on võimalik üheainsa töövahendiga saavutada nii viimistlus- kui poleerimistoime. Surve suurendamine tõhustab viimistlusfaasi tõhusust. Soovitud poleerimiskvaliteedi saamiseks rakendage vähem jõudu- tulemuseks on sile ning särav emaililaadne pind.

OMADUSED JA EELISED

- Ühest silikoonpoleerijast piisab, et saavutada restauratsiooni soovitud viimistlus- ja poleerimisaste, säästes protseduuri käigus aega ja abrasiivmaterjale.
- Suure vastupidavusega poleerijaid saab kasutada mitu korda, need sobivad steriliseerimiseks.
- Saadaval 3 kujuga: koonus, ketas, karikas.



PAKEND

KIRJELDUS

SeptoPolisher* segakomplekt: 8 poleerimisotsakut (3 koonust, 3 ketast, 2 karikat)+ SeptoPlus mandrell

SeptoPolisher* täitekomplekt: 8 koonust + SeptoPlus mandrell

SeptoPolisher* täitekomplekt: 8 ketast + SeptoPlus mandrell

SeptoPolisher* täitekomplekt: 8 karikat + SeptoPlus mandrell

SeptoPlus mandrell: 1 tk

*Vajalik SeptoPlus mandrell (spindel)

SeptoFipo Strip

Viimistlemine ja poleerimine



VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE

SeptoFipo Strip (viimistlus- ja poleerimisribad)

ALUMIINIUMOKSIIDKATTEGA POLÜESTERRIBAD


NÄIDUSTUSED

SeptoFipo ribad on mõeldud komposiitrestauratsioonide proksimaalsete pindade viimistlemiseks ja poleerimiseks.

Sisestage riba proksimaalsesse ruumi neutraalset keskkoha kasutades. Alustage restauratsiooni keskmiseteralise ribapoollega (hall) ning seejärel poleerige peeneteralise ribapoollega (valge).

OMADUSED JA EELISED

- Keskmine ja peen teralisus on eraldatud neutraalse kohaga ribal, et riba oleks läbi kontaktpunkti ala lihtsam proksimaalsesse ruumi sisestada ilma seda kahjustamata.
- Saadaval 2,5 mm ja 4,0 mm laiusega.

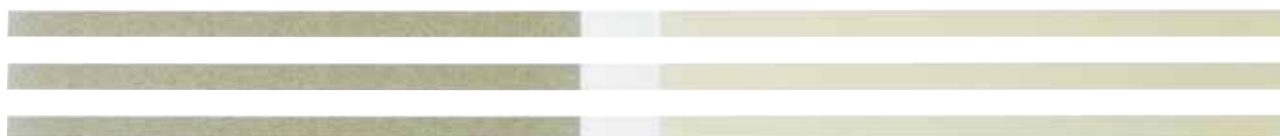

PAKEND


KIRJELDUS

SeptoFipo Strips: 100 riba (2,5 mm)

SeptoFipo Strips: 100 riba (4 mm)

SeptoDiamond Strip

Viimistlemine ja poleerimine

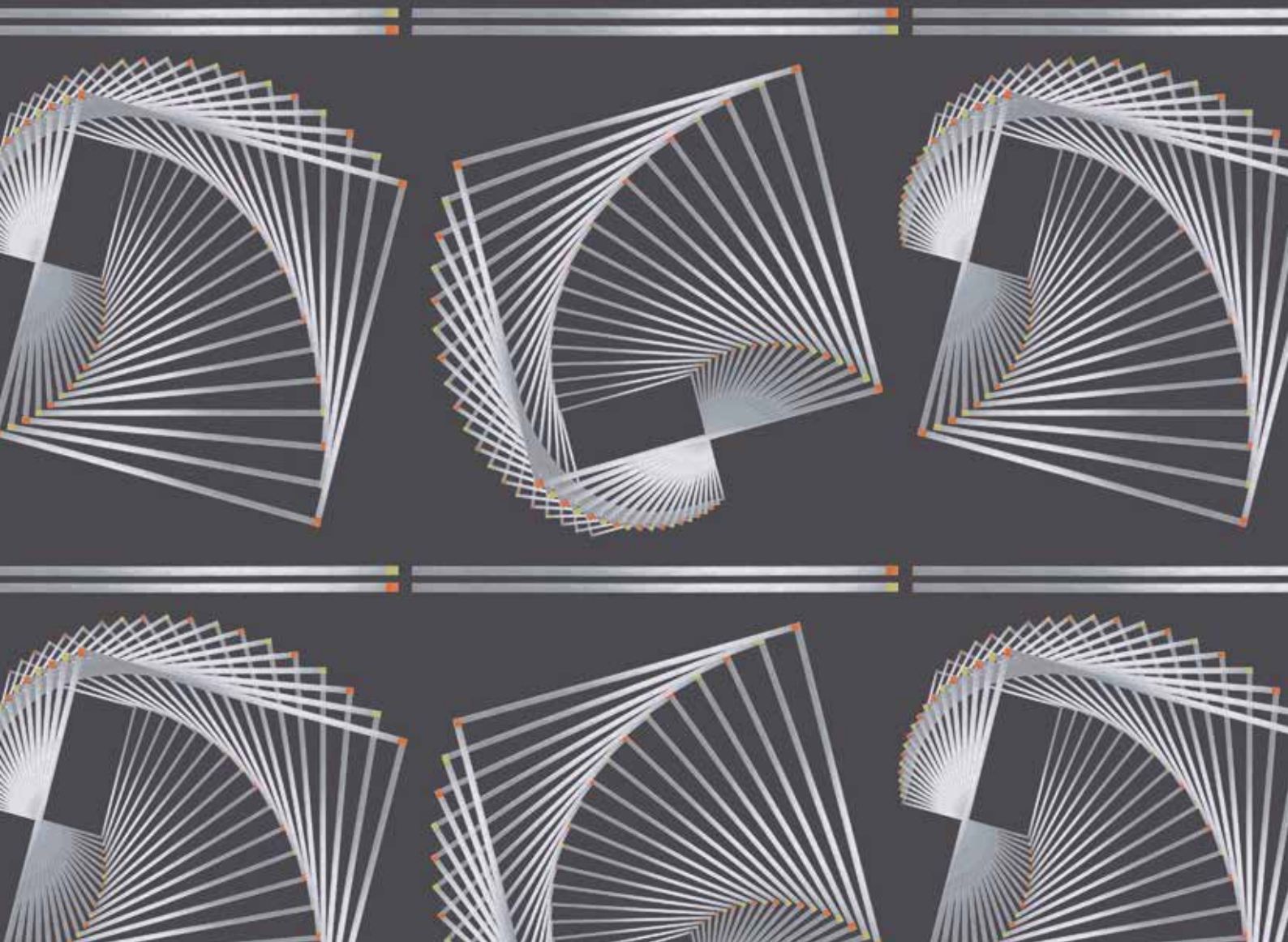

VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE

SeptoDiamond Strip (teemantkattega terasribad)

TEEMANTKATTEGA ROOSTEVABAST TERASEST RIBAD

NÄIDUSTUSED

Diamond Strip on teemantkattega terasriba, mis on mõeldud täidismaterjalide viimistlemiseks ja ortodontiliseks ribatöötlemiseks.

Parimate tulemuste saavutamiseks on soovitatav kasutada mõlemat riba, alustades keskmiseteralisest ja lõpetades peeneteralisega.

OMADUSED JA EELISED

- Suurepärase restauratsioonide viimistleja.
- Väga tõhus ortodontiline ribatöötlus.
- Suur vastupidavus.
- Saadaval peene (kollane) ja keskmise (punane) teralisusega – laius 2,5 mm.



PAKEND

KIRJELDUS

SeptoDiamond Strips: 12 riba 2,5 mm (peen)

SeptoDiamond Strips: 12 riba 2,5 mm (keskmine)

SeptoDiamond Strips: 12 riba 2,5 mm (keskmine ja peen)

SeptoDiamond Paste

Viimistlemine ja poleerimine



VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE

SeptoDiamond Paste (teemantpoleerimis pasta)

TEEMANTPOLEERIMISPASTA

NÄIDUSTUSED

SeptoDiamond Paste on teemantpoleerimis pasta, mis mõeldud lõpp-poleerimiseks ja kõrgläike admiseks kõigile otsestele ja kaudsetele restauratsioonidele. Annab parima võimaliku läike emailile, keraamikale (portselanile), komposiidile, amalgaam- ja metallpindadele.

OMADUSED JA EELISED

- Kõrgläige ja imeline loomulik sära kõigile restauratsioonimaterjalidele ja emailile.
- Võimalik kasutada hambaravi kabinettis ja hambatehnika laboris.
- Ülipeen teralisus (1-2 mikronit).
- Veelahustuv, seega on jääke lihtne eemaldada.
- Ideaalne kasutada viltketastega, mis suurendavad toote toimet viimistlusläike andmisel.




PAKEND

KIRJELDUS

SeptoDiamond Paste: 2 g süstal

SeptoMatrix Cervical

Matriitsid

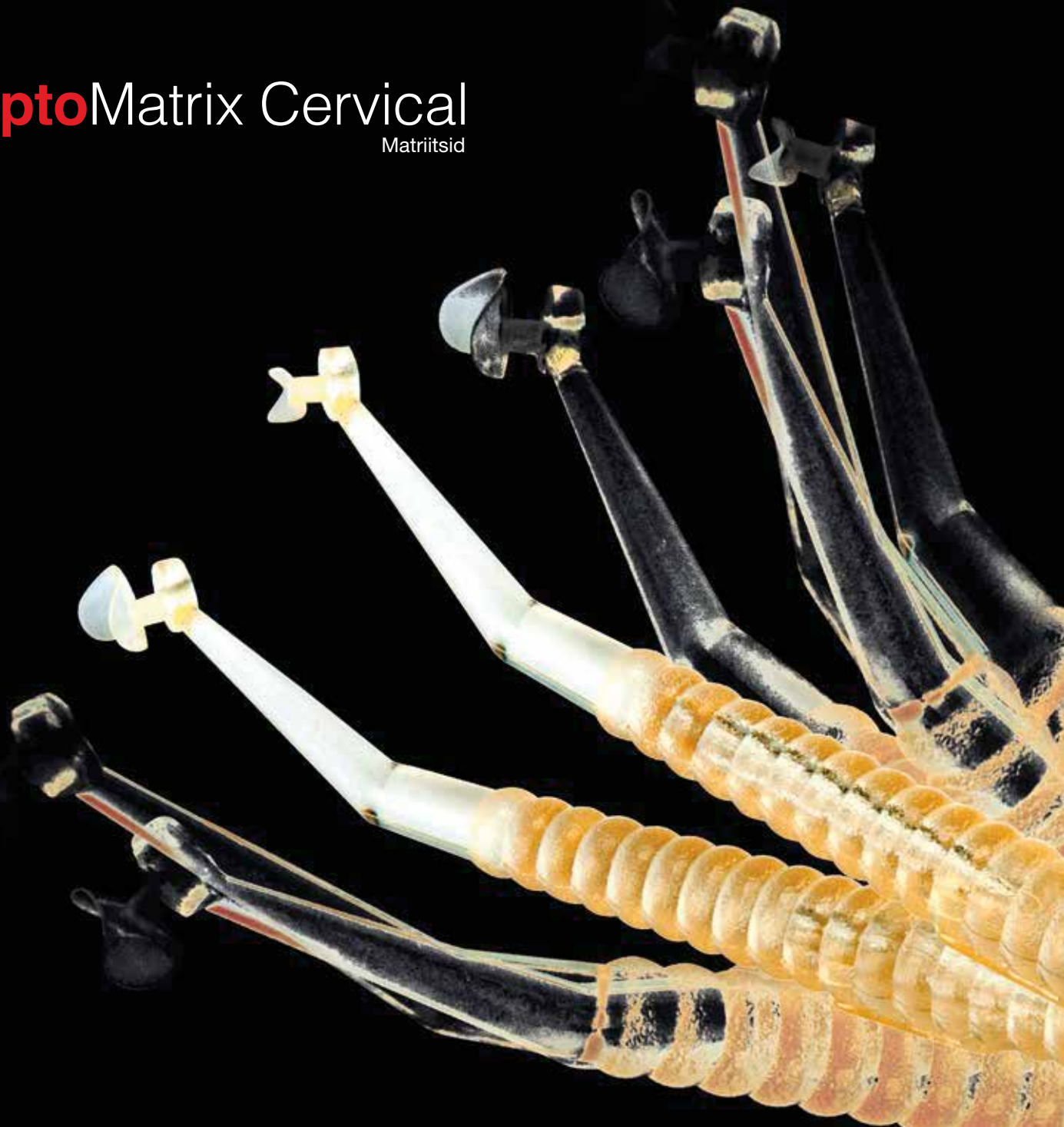

MATRIITSID

SeptoMatrix Cervical (tservikaalsed matriitsid)

LÄBIPAISTVAD MATRIITSSÜSTEEMID V KLASSI RESTAURATSIOONIDE MODELLEERIMISEKS

NÄIDUSTUSED

SeptoMatrix Cervical on suurepärase instrument, mis hõlbustab otseste komposiitrestauratsioonide modelleerimist. Matriitsikomplekti kuulub 5 painduvat eri suuruse ja vormiga matriitsi. Tänu neile on töö väga mugav, tööaeg lühem ning täidismaterjali täiuslik kohandamine ja modelleerimine hambakaela piirkonnas on garanteeritud.

OMADUSED JA EELISED

- Tänu eri suurustele on SeptoMatrix Cervicali lihtne kasutada kõigi V klassi restauratsioonide puhul.
- Töövahendit surve all hoides saab komposiite läbi läbipaistva matriitsi valguskõvastada. Vähese lõpptöötlemise ja kerge poleerimise tulemuseks on sile pind.
- Ei kleepu komposiitide ega klaasionomeeride külge.
- Sobib steriliseerimiseks.



PAKEND

KIRJELDUS

SeptoMatrix Cervical komplekt: 2 instrumenti + 10 matriitsi (2 × ülisuur, 2 × suur, 2 × keskmine, 2 × väike, 2 × üliväike)

Sega-täitekomplekt: 50 matriitsi (10 × ülisuur, 10 × suur, 10 × keskmine, 10 × väike, 10 × üliväike)

SeptoMatrix Cervical täitekomplekt: 50 ülisuurt matriitsi

SeptoMatrix Cervical täitekomplekt: 50 suurt matriitsi

SeptoMatrix Cervical täitekomplekt: 50 keskmist matriitsi

SeptoMatrix Cervical täitekomplekt: 50 väikest matriitsi

SeptoMatrix Cervical täitekomplekt: 50 üliväikest matriitsi



SeptoMatrix Sectional
Matriitsid

MATRIITSID

SeptoMatrix Sectional (seksioonmatriitsid)

EELVORMITUD SEKTSIOONMATRIITSIDE SÜSTEEM KOOS TUGEVDATUD RÕNGASTEGA II KLASSI RESTAURATSIOONIDEKS

NÄIDUSTUSED

Süsteem SeptoMatrix Sectional on mõeldud II klassi kaviteetide restauratsiooniks. See loob tingimused kontaktpunktide täpseks rekonstruktsiooniks ja loob proksimaalsetel pindadel loomuliku hambaanatomia. Rõngad on varustatud kolmnurksete silikoonotstega istuvuse täiuslikuks kohandamiseks. Rõngaste pingutamine tagab eraldamisel kontrollitud jõu – kõva rõngas (sinine) või pehme rõngas (roosa) – ning tänu rõngaste suuremale vastupidavusele ka suurema stabiilsuse rekonstrueerimisprotseduuri ajal.

OMADUSED JA EELISED

- Vastupidavast materjalist tugevdusmehhanism.
- Ainulaadne disain: tagab stabiilsuse, võimaldab tangidega ohutult avada.
- Lihtne, kiire ja mugav paigaldada tänu rõngasüsteemile, mis vahetab välja tavalised matriitsihoidikud.
- Sektsioonmatriitsid on saadaval 3 eri suuruses kasutamiseks erinevates kliinilistes situatsioonides.
- Silikoonotstega rõngad sobivad steriliseerimiseks.



PAKEND

KIRJELDUS

SeptoMatrix Sectional segakomplekt: 100 matriitsi (30 × suur, 40 × keskmine, 30 × väike) + 2 rõngast (kõva ja pehme) + 14 kolmnurkset silikoonotsakut

SeptoMatrix Sectional segakomplekt: 50 matriitsi (15 × suur, 20 × keskmine, 15 × väike) + 2 rõngast (kõva ja pehme) + 8 kolmnurkset silikoonotsakut

SeptoMatrix Sectional täitekomplekt: 1 rõngas (kõva) + 8 kolmnurkset silikoonotsakut

SeptoMatrix Sectional täitekomplekt: 1 rõngas (pehme) + 8 kolmnurkset silikoonotsakut

KIRJELDUS

SeptoMatrix Sectional sega-täitekomplekt: 50 matriitsi (15 × suur, 20 × keskmine, 15 × väike)

SeptoMatrix Sectional täitekomplekt: 50 matriitsi

SeptoMatrix Sectional täitekomplekt: 50 keskmist matriitsi

SeptoMatrix Sectional täitekomplekt: 50 väikest matriitsi

SeptoMatrix Sectional kolmnurksed silikoonotsakud: 50 tk

SeptoWedges
Kiilud



KIILUD

SeptoWedges (puidust kiilud)

ANATOOMILISED PUIDUST KIILUD


NÄIDUSTUSED

Üks otseste täitmisprotseduuride tähtsamaid tingimusi on restauratsioonile õige anatoomilise kuju rekonstrueerimine. Kvaliteetsed puidust kiilud on mõeldud matriitsi kohandamiseks ja/ või külgnevate hammaste eraldamiseks.

Nr.	Kõrgus	Laius	Pikkus
1	2,2 mm	1,4 mm	12 mm
2	2,2 mm	1,4 mm	13 mm
3	2,2 mm	1,6 mm	14 mm
4	2,2 mm	1,6 mm	15 mm
5	2,5 mm	2,0 mm	16 mm

OMADUSED JA EELISED

- Anatoomiliselt vormitud paremaks kohandamiseks interproksimaalsete pindadega ja külgnevate hammaste eraldamiseks.
- Saadaval 5 värvkodeeritud suurus.

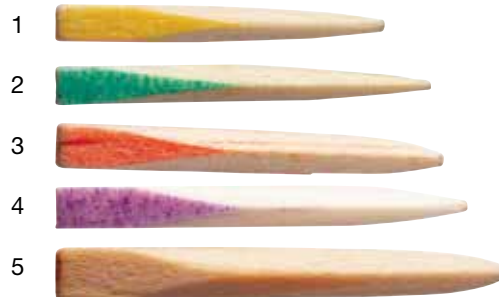

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoWedges segakomplekt: 100 tk (30 × kollane, 20 × sinine, 20 × punane, 20 × lilla, 10 × värvitu)

Täitekomplekt: 100 tk – kollane

Täitekomplekt: 100 tk – türkiis

Täitekomplekt: 100 tk – punane

Täitekomplekt: 100 tk – lilla

Täitekomplekt: 100 tk – värvitu (naturaalne)

SeptoTape
Isolatsioon



ISOLATSIOON

SeptoTape (teip hammaste isoleerimiseks)

TEIP HAMMASTE ISOLEERIMISEKS

NÄIDUSTUSED

SeptoTape on näidustatud hammaste isoleerimiseks happetöötlaste ajal, adhesiivide ja komposiitide pealekandise ajal ning muudel protseduuridel. Liikumatus ja painduvast materjalist teip sobitub ümber hamba ja kaitseb seda soovimatu saaste eest külgneval hambal tehtavate restauratsioonitööde ajal.

OMADUSED JA EELISED

- Kaitseb isoleeritud hammast kemikaalide kahjuliku mõju eest.
- Talub happeid, adhesiive ja muid keemilisi aineid.
- Väga painduv ja õhuke, lihtne sisestada interproksimaalsesse ruumi.
- Kasutamiseks üksnes hambaarstidele.

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoTape: 5 m hammaste isoleerimise teip



The background of the image consists of several horizontal bands of perforated metal strips. Each strip is a light gray color with a regular grid of small, dark circular holes. The strips are separated by thin black lines, creating a repeating pattern that fills the entire frame.

SeptoProphy Strip

Profülaktika

PROFÜLAKTIKA

SeptoProphy Strip (profülaktilised terasribad hambakivi eemaldamiseks)

MITTEABRASIIVSED TERASRIBAD HAMBAKIVI INTEPROKSIMAALSEKS EEMALDAMISEKS


NÄIDUSTUSED

SeptoProphy Strips terasribad on mõeldud hambakatu ja hambakivi eemaldamiseks.

SeptoProphy Strips on asendamatuks abiks profülaktilistel protseduuridel. Riba ühel küljel asuvad aukude ümber rõngakujulised mikroterad, mis võimaldavad tugevat hambakivi täpselt eemaldada, kaitstes emaili ja restauratsioonimaterjalide pinda.

OMADUSED JA EELISED

- Hambakivi lihtne, kiire ja ohutu eemaldamine ilma hambaemaili kahjustamata.
- Mitteabradiivne, kaitseb emaili, restauratsioonimaterjali ja proteeselemente.
- Rõngakujulised mikroterad lisavad täpsust ja kiirendavad hambakatu ja hambakivi eemaldamist.
- Riba võimaldab tänu 0,05 mm paksusele lihtsa ligipääsu interproksimaalsesse ruumi.

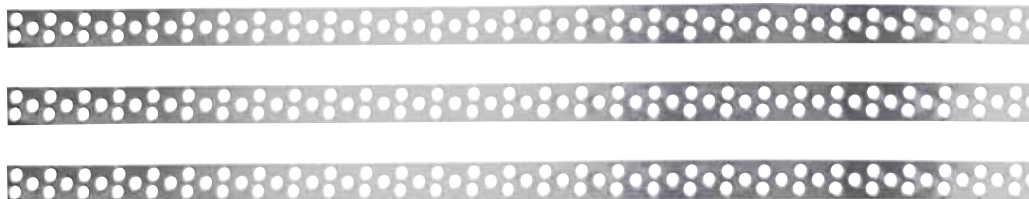

PAKEND

KIRJELDUS

SeptoProphy Strips: 10 riba

www.septoaccessories.com



Septodont

58 rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés
France

www.septodont.com